

Мебель лабораторная

ЛОиП, Bochem, Köttermann, Waldner


ДИА-М
современная лаборатория

Столешницы, тумбы, мойки, шкафы





Каркасы мебели. Широкий выбор материалов каркасов: алюминий, покрытый порошковой краской; меламин; нержавеющая сталь; полипропилен.

Столешницы. Разные типы столешниц и внутренних покрытий для работ, как в стандартных условиях, так и с химически агрессивными агентами, с радиоизотопами; на фармацевтических производствах, для стерильных работ, для чистых помещений; с термостойкостью до 800 °С.

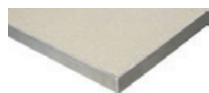


- **Керамогранитная плитка** устойчива к абразивам, концентрированной серной и азотной кислотам, концентрированным щелочам, растворам солей, йоду.

- **Ламинат** выдерживает кратковременный нагрев до 180 °С; для работ с неагрессивными веществами.

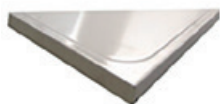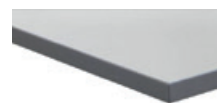

- **Нержавеющая сталь** имеет противопроливочный бортик, предназначена для работы с органическими растворителями, красителями, горячими маслами.

- **Trespa** – полиуретан-акриловая композиция сверхвысокого прессования – обладает ударопрочностью, влагостойкостью, подходит для работы с радиоизотопами, легко моется.

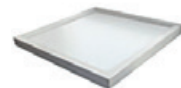


- **Fridurit 20 мм и 26 мм** – бесшовная керамическая глазурованная плита – обладает устойчивостью к открытому огню, ударопрочностью, подходит для работы с радиоизотопами, легко моется, устойчива к концентрированным кислотам.

- **Меламин** устойчив к органическим растворителям и красителям.
- **Кафельная плитка** устойчива к концентрированным кислотам, щелочам, органическим растворителям, красителям.
- **Полипропилен** устойчив к органическим растворителям, красителям, концентрированным серной, азотной и плавиковой кислотам (до 1 часа).



- **Лабораторная керамика К8** (монолитная бесшовная лабораторная керамика толщиной 8 мм) устойчива практически к любым концентрированным кислотам и щелочам (кроме плавиковой), обладает износостойкостью к царапинам и другим механическим повреждениям.

- **Полированный гранит** обладает превосходной износостойкостью, морозостойкостью, термостойкостью, устойчив к открытому пламени; лучшее применение для весов.

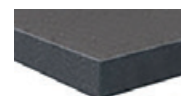

Столешницы и поверхности изготавливаются с бортиками от протеканий и без. Возможна разная толщина столешниц.

лабораторное оборудование ■ пластик ■ стекло ■ реактивы ■ наборы

www.dia-m.ru
заказ онлайн



Стол� и мойки

- На опорных тумбах или металлокаркасе
- Островные и пристенные
- Для весов
- Передвижные
- Для титрования
- Компьютерные
- Для персонала
- Столы-мойки

Шкафы

- Для лабораторной посуды
- Для реактивов
- Для баллонов с газом
- Для агрессивных агентов
- Для ЛВЖ (огнеустойчивость до 90 минут)
- Для лабораторной одежды
- Для документов

Тумбы

- Навесные
- Подкатные
- Для хранения кислот и ЛВЖ

Встраиваемая техника

- Холодильники
- Морозильники
- Посудомоечные машины



Мебель ЛОИП (Россия) – отлично зарекомендовавшая себя марка; широкий выбор мебели для любых целей и задач.

Серия Лаб – экономичный вариант мебели для учебных, медицинских учреждений. Основание мебели представляет собой сварную металлоконструкцию, пластиковая окантовка увеличивает срок службы и износостойкость; характеризуется простотой сборки.

Серия Лаб-Pro 2015 – сконструирована на алюминиевых профилях новой конструкции, окрашенные порошковой краской; сборно-разборный каркас выполнен из металлического профиля прямоугольного сечения и также окрашен порошковой краской.

Мебель Vochem (Германия) – столы, тумбы, шкафы, тележки, стеллажи изготовлены полностью из нержавеющей стали.

Мебель Köttermann и Waldner (Германия) от лидеров европейского рынка среди производителей лабораторной мебели.

Мебель разрабатывается и производится для любых областей применения, имеет удобную модульную конструкцию и позволяет самому пользователю дооснастить уже имеющиеся элементы обстановки. Отличительные особенности этих производителей: исключительное качество, высокая безопасность, эргономичность, легкость и комфорт использования мебели, высокая степень автоматизации (сенсорные двери, стеклоподъёмник вытяжных шкафов, мониторинг отводящих газов и др.).

Все заводы предлагают разработку мебели под конкретные задачи пользователя.



000 «Диаэм»

www.dia-m.ru

Москва
ул. Магаданская, 7/3
тел./факс:
(495) 745-0508
sales@dia-m.ru

Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, б/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Санкт-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru