
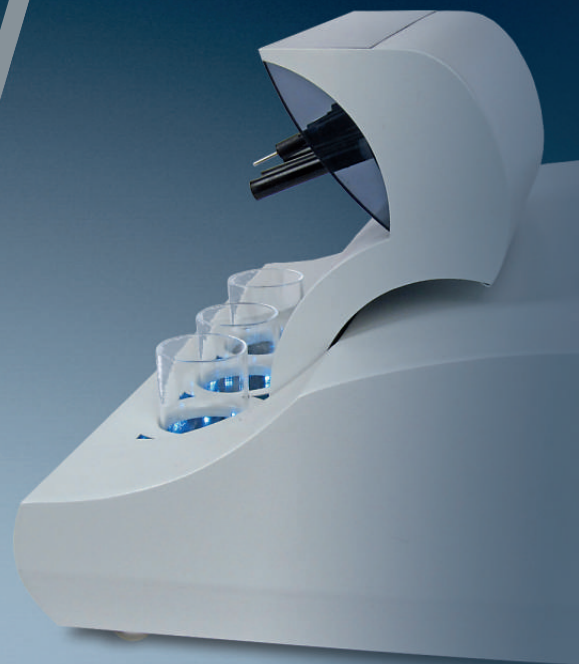


ДИА•М
современная лаборатория

www.dia-m.ru
заказ on-line

ТОМЬ
АНАЛИТ

УДОБСТВО В РАБОТЕ – КЛЮЧ К УСПЕХУ

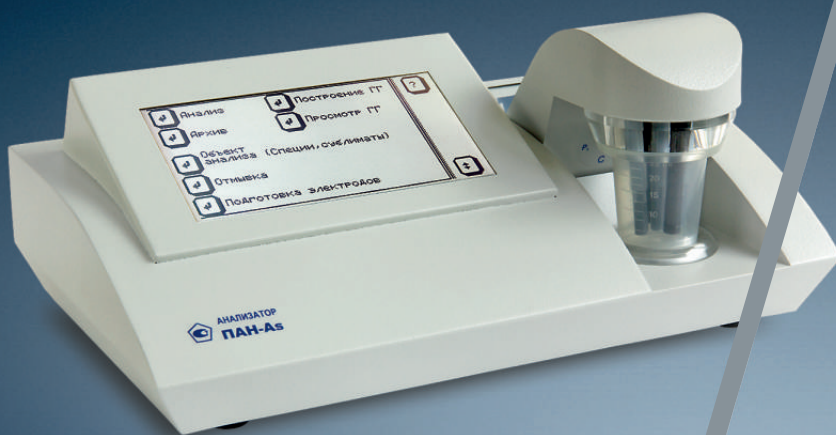

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Специализированные муфельные печи, совмещенные с нагревательной плитой, позволяют осуществлять процесс пробоподготовки в оптимальных условиях благодаря программированию режима термообработки.

ПДП-АНАЛИТИКА



ПДП-Lab



Программируемые муфельные печи, совмещенные с нагревательной плитой, представляют собой компактные, быстродействующие устройства, позволяющие проводить одновременное выпаривание и озоление проб. Имеют камеру муфельного типа и размещенную на ней нагревательную плиту.

Процессы выпаривания и озоления управляются независимо друг от друга и могут осуществляться одновременно.

Программирование обеспечивает возможность создания по 9 программ термообработки для муфеля и для нагревательной плиты. В каждой программе можно установить до 9 этапов с заданными значениями температуры и длительности.

ПДП-Аналитика имеет увеличенную поверхность нагревательной плиты.

Устройства снабжены удобной керамической подставкой для горячих тиглей.

Используются тигли различного объема: кварцевые 20 и 65 мл, и фарфоровые до 90 мл.

Детали корпуса выполнены из коррозионностойкой стали, что допускает эксплуатацию муфельных печей в присутствии агрессивных сред.

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур муфеля, °С	200–750
Диапазон рабочих температур плиты, °С	70–400
Размеры муфеля, мм	278x68x80
Размеры плиты ПДП-Lab, мм	300x40
Размеры плиты ПДП-Аналитика, мм	300x80
Объем используемых тиглей, мл	20, 65, 90
Масса, кг	5,5





000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

